

Il tutore modulare dorso-lombare TENOMAG è il primo dispositivo in grado di combinare la terapia con il movimento grazie alla magnetoterapia integrata. Le caratteristiche innovative dei materiali e il design, offrono al Paziente e al suo Prescrittore la soluzione migliore al trattamento della patologia. La grande versatilità del prodotto assicura inoltre un'adattabilità "universale" seguendo perfettamente l'anatomia e le esigenze di ogni singolo paziente.

L'INSIEME DELLE CARATTERISTICHE TECNICO-STRUTTURALI ASSICURANO L'ASSOLUTA ECCELLENZA DEL PRODOTTO:

STABILIZZAZIONE

TERAPIA

MOVIMENTO

Codice articolo: TO1308MG			
TAGLIA	1	2	3
Circonf. bacino [cm]	60 80	80 100	100 120
Colore: grigio antracite			

ISO 9001:2008
NO:IT264107
EN/ISO
13485:2012
NO:IT263165



Tenomag è conforme alla direttiva europea 93/42/CEE
In particolare, il tutore dorso lombare
è un dispositivo medico di classe 1.
Orthomag è un dispositivo medico di classe 2a.
Tenomag accordant to European directive 93/42/CEE
In particular, the dorso lumbar brace is a medical device of class 1.
Orthomag is a medical device of class 2a.



Tenortho
Get back in action

Tenortho Srl Unipersonale • Via Locatelli, 82 • 20853 Biassono (MB) Italy
Tel. +39 039 8943960 • Fax +39 039 8943968 • www.tenortho.com • info@tenortho.com


TENOMAG

IL PRIMO CORSETTO IN FIBRA DI CARBONIO A STABILIZZAZIONE TERAPICA.

FIRST CARBON FIBER CORSET WITH THERAPIC STABILIZATION.

Interno in
CETEX



Esterno in
vellutino elastico

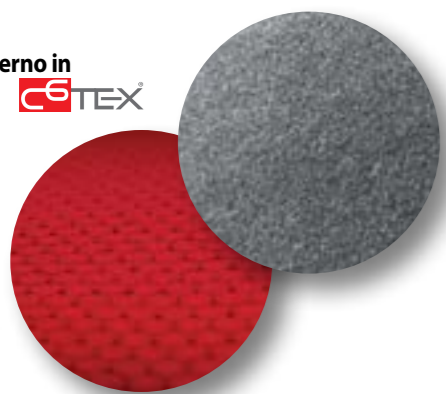

SPINTE COMBinate

Combinazione di:

- spinta dorsale
 - contropinta a livello di spalle e bacino
- al fine di garantire un sostegno ottimale.

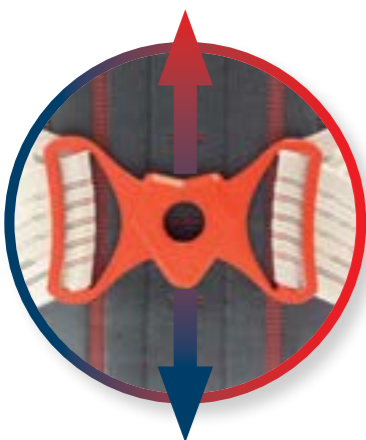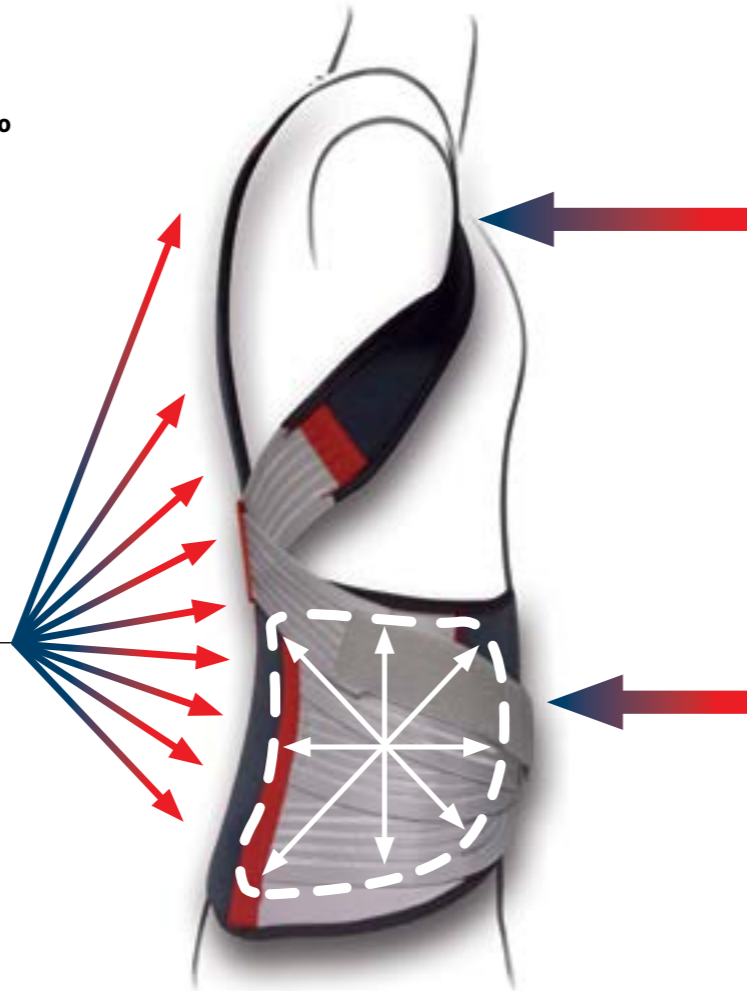


SISTEMA «UP&DOWN»

Grazie al sistema di passanti regolabile in altezza è possibile modulare la spinta dorso-lombare e a livello delle spalle.

DOPPIA AZIONE : 2 in 1

Tasche posteriori predisposte per alloggiare alternativamente un telaio in alluminio leggero o una coppia di stecche in acciaio rivestito. Entrambi gli inserti sono facilmente modellabili e assicurano una vestibilità ottimale, quasi «su misura». La scelta dell'inserto permette una duplice azione:

- Telaio: fase acuta **A**
- Stecche: fase cronica **B**

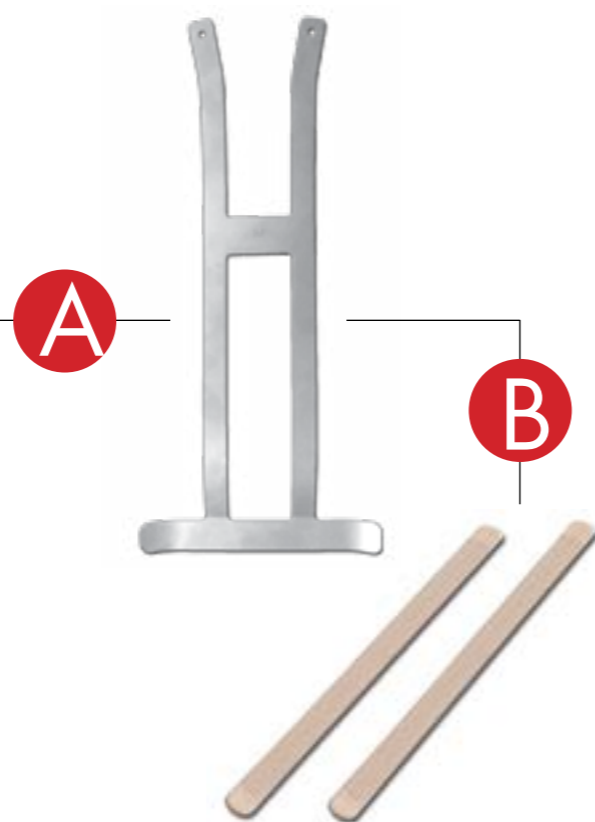

POSIZIONAMENTO SOLENOIDE

Grazie alla tasca interna e alla serigrafia è possibile posizionare più accuratamente il solenoide sulla zona da trattare con la magnetoterapia.



NEL KIT TENOMAG SARANNO PRESENTI:



CORSETTO



ORTHOMAG



SOLENOIDE



FASCE



CARICA BATTERIA AUTO



CARICA BATTERIA 12V

SPECIFICHE TECNICHE:

Orthomag® dispone di due programmi preimpostati. Il primo (Tasto L) lavora alla frequenza di 50 Hz adatta per il trattamento delle patologie a carico dei tessuti ossei (es. artrosi, fratture, osteoporosi). Il secondo (Tasto H) a 75 Hz consigliati invece per problemi legati a stati infiammatori (es. tendiniti, lombalgie, cervicalgie).

INDICAZIONI

FRATTURE TRAUMATICHE • OSTEOPOROSI • CEDIMENTI VERTEBRALI DORSALI E AL PASSAGGIO DORSO-LOMBARE SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA • OSTEOMALACIE FRATTUROSE • ARTROSI DORSO-LOMBARE • IPERCIFOSI DORSALI • LOMBALGIA E LOMBOSCIATALGIA CRONICA.